


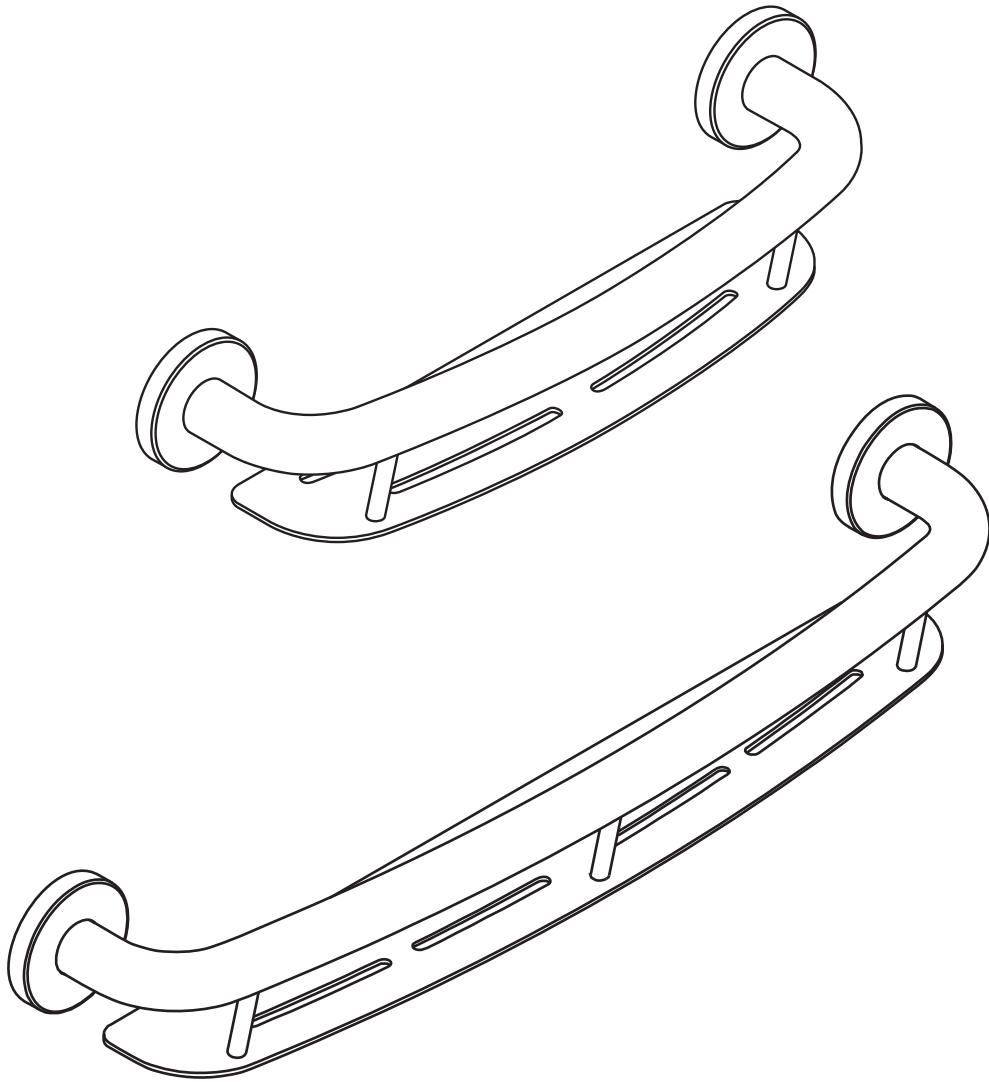


## **PLUS Shampoo Shelf**

PLUS-SHS  
(DC191 - RevE)

[healthcraftproducts.com](http://healthcraftproducts.com)

A

1

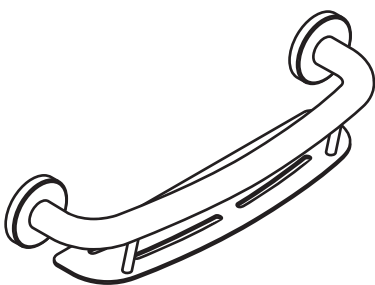


2






B


1

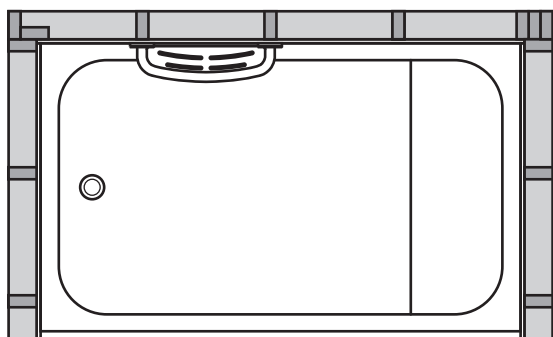


2

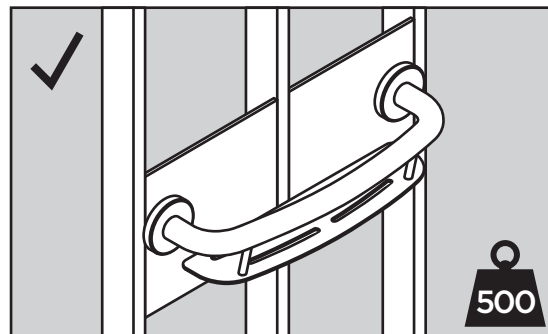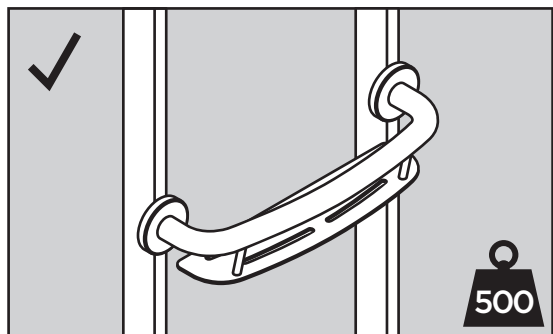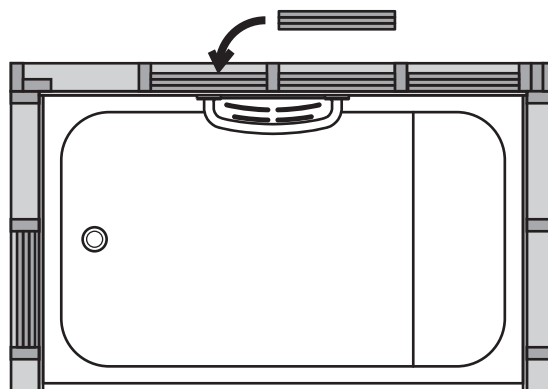





3

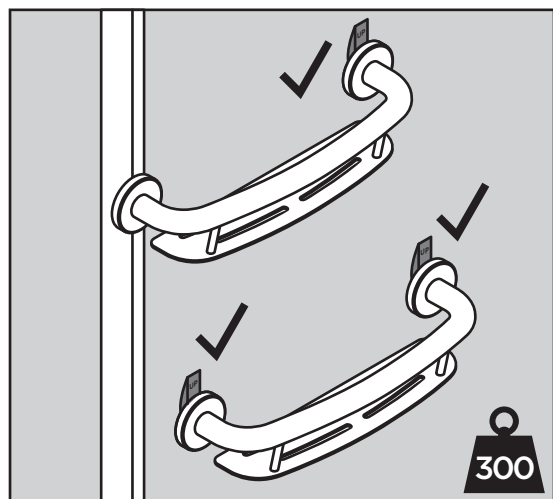



4

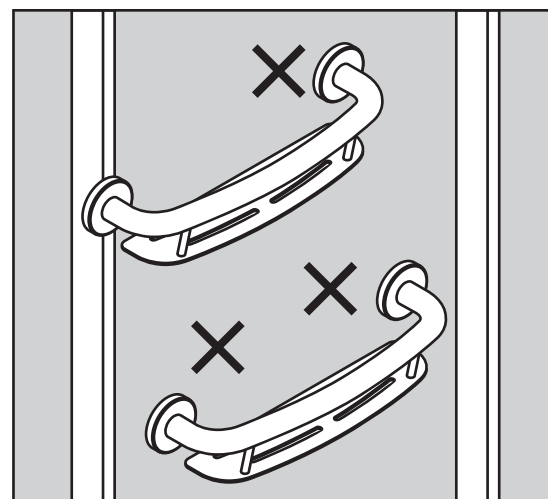

## B

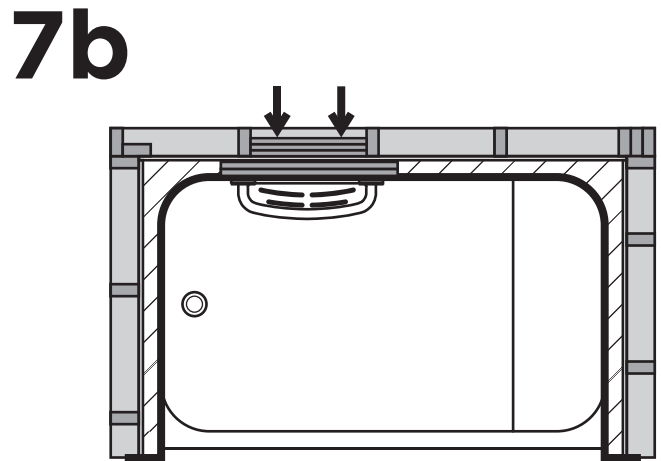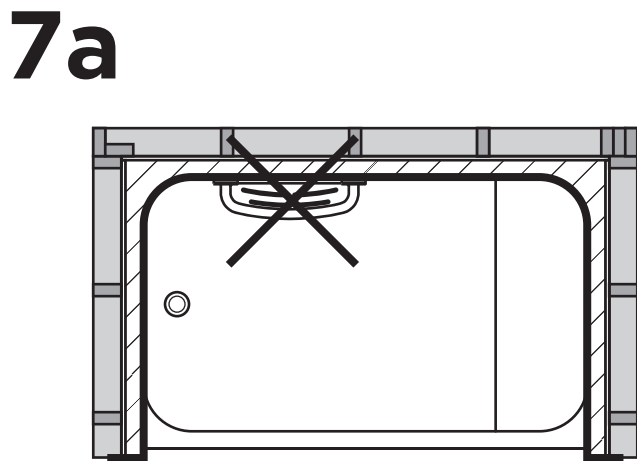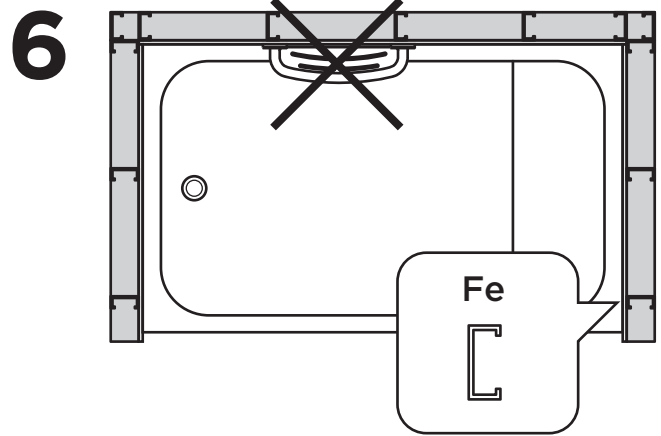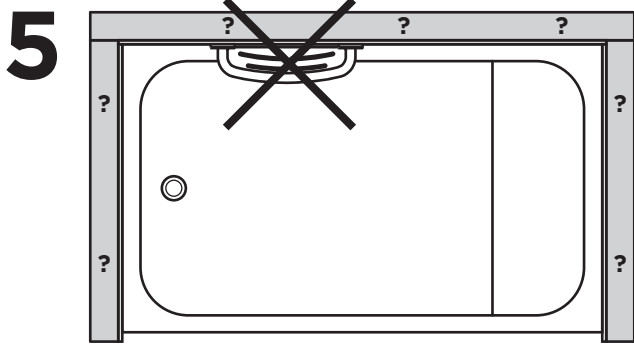


## C

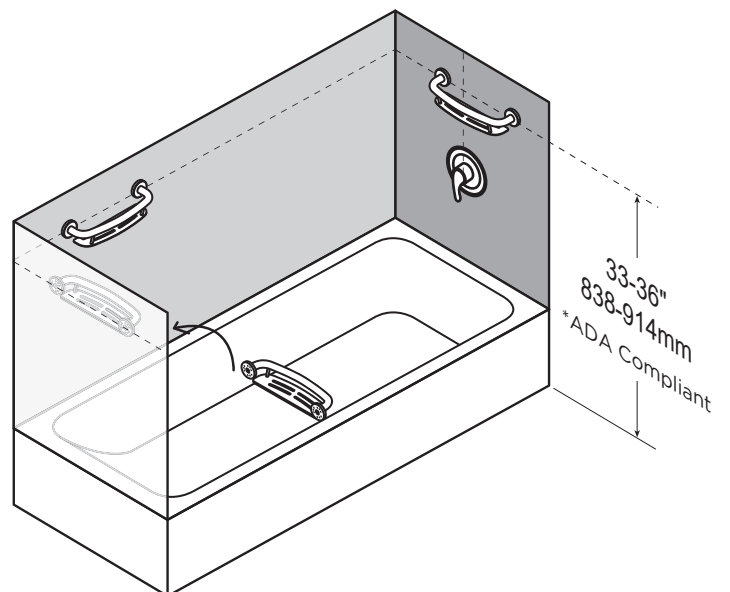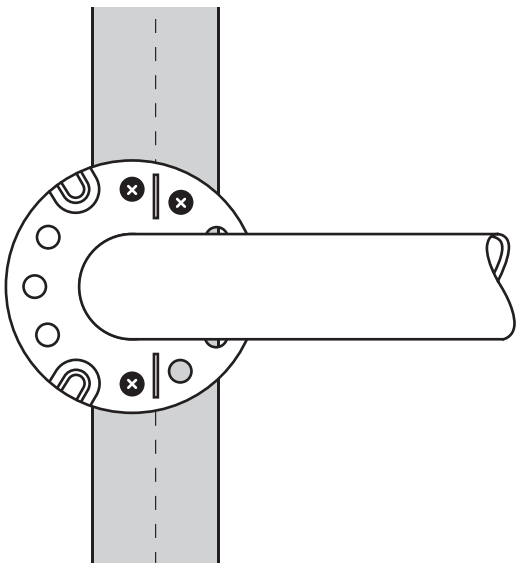


# D


1

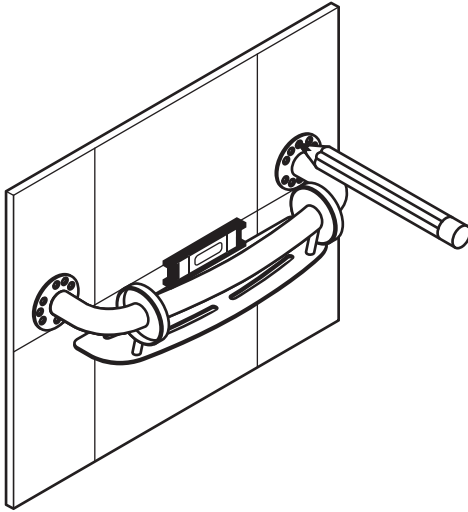


2

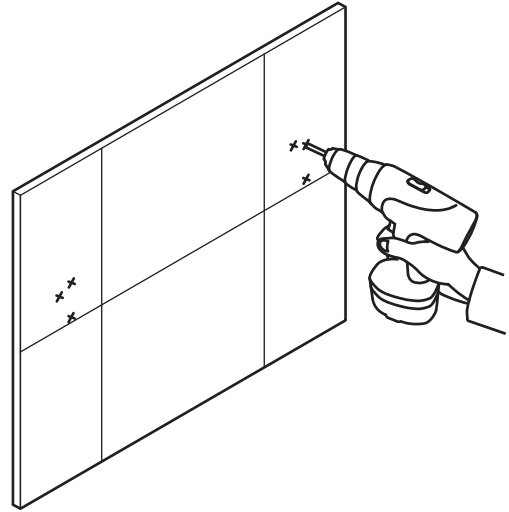



3

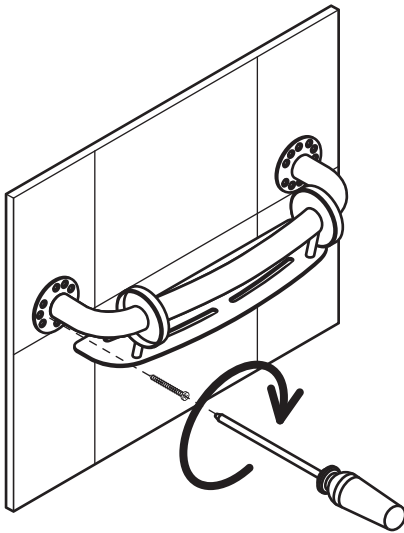

4

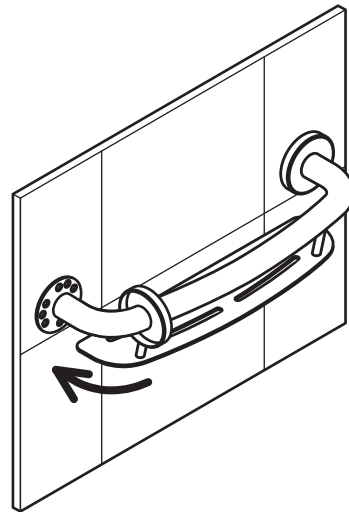

# E




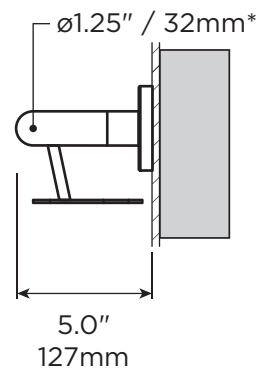
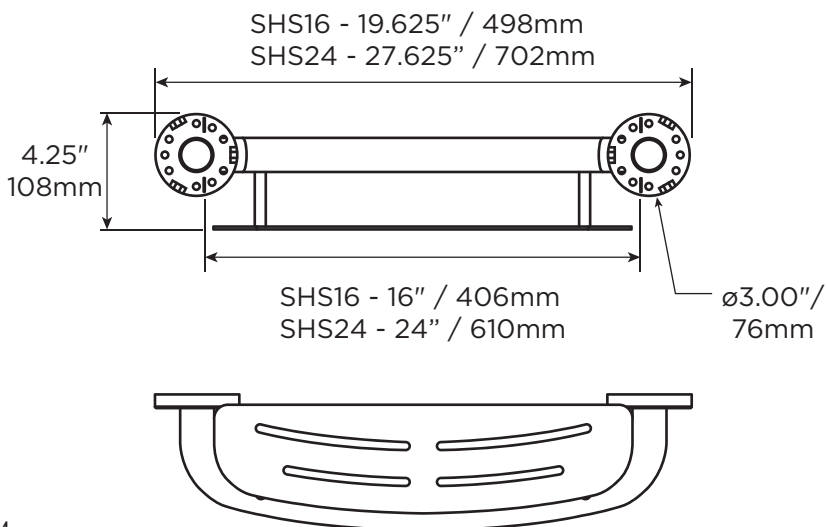


**MAX**  
500 lbs  
227kg

\*ADA Compliant



2.90lbs  
1.32kg

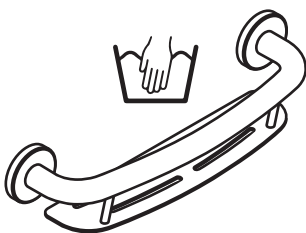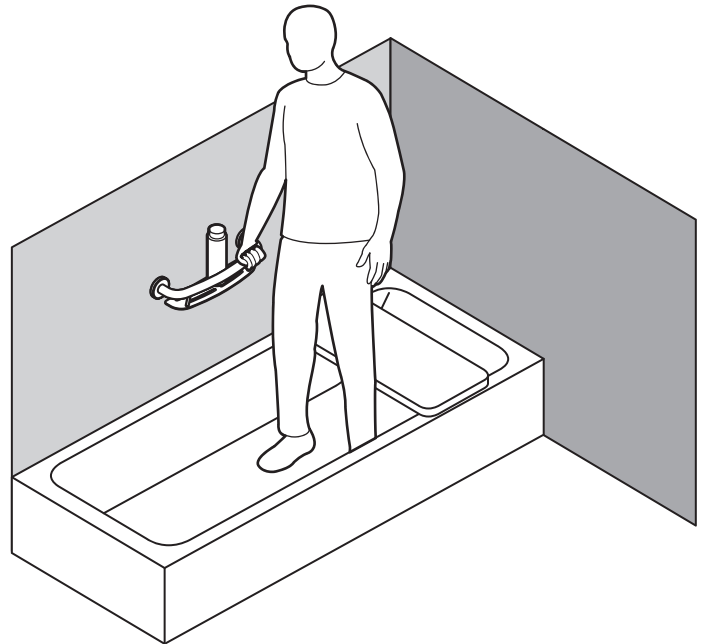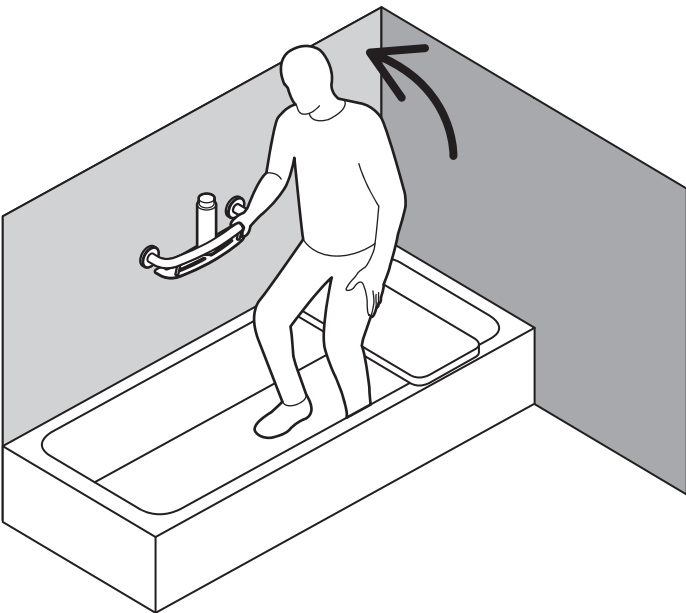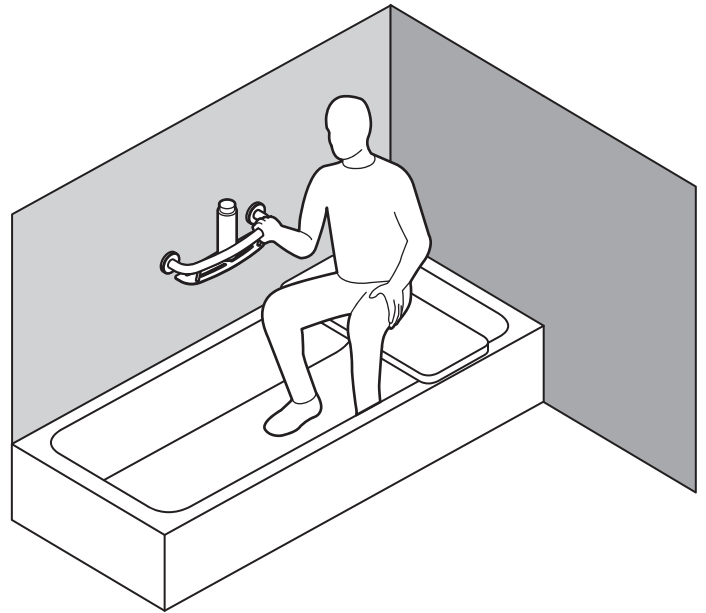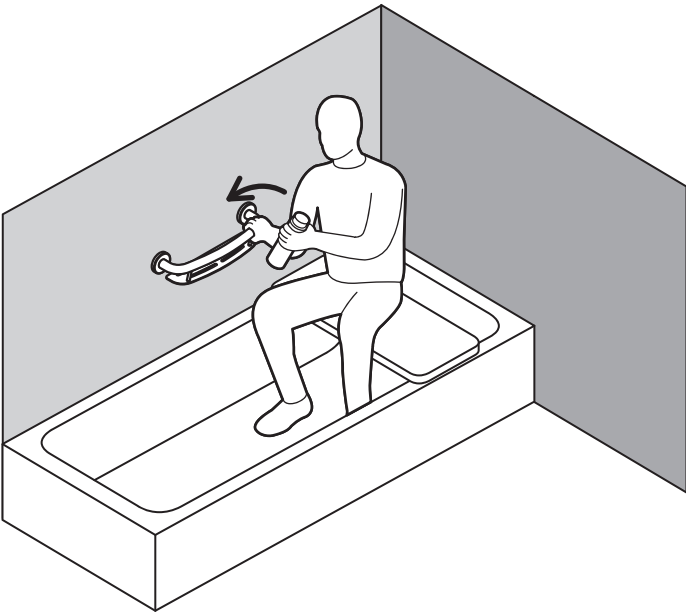

# English

## OVERVIEW

Thank you for choosing the PLUS Shampoo Shelf. Please read and understand the instructions in this manual; keep manual for future reference. It is your responsibility to see that your PLUS Shampoo Shelf is properly assembled, installed, and cared for. Failure to follow instructions in this manual could result in serious injury or death. If you are not equipped to undertake the outlined work, we would recommend that you have your PLUS Shampoo Shelf installed by a qualified contractor.

The PLUS Shampoo Shelf is a combination grab bar and shelf, designed to disguise safety in a bathroom accessory. The PLUS Shampoo Shelf is intended to be used as a grab bar and its secondary function is to store bottles and other shower/bath products. The PLUS Shampoo Shelf is intended for moderate vertical and horizontal load bearing to provide sitting and standing support for people with disability. The PLUS Shampoo Shelf is installed with appropriate fasteners to a structural wall. The tray (which holds bottles) is NOT intended to be a support product. The maximum user weight for this product is 500lbs / 227kgs. Note: Product is not intended to support full body weight. The PLUS Shampoo Shelf is not to be used in any other way than described above.

## LIMITED LIFETIME WARRANTY

Products are covered by a limited lifetime warranty against defects in materials and workmanship for the original purchaser. Warranty excludes products that have been damaged through misuse, accidental damage, alteration, normal wear and tear, wood material and stain, or the use of corrosive or abrasive cleaning products.

Buyer hereby indemnifies, agrees to hold harmless and defend HealthCraft Products Inc. from and against any and all liabilities, claims, (founded and unfounded), losses, damages, costs and expenses (including without limitation consequential damages and reasonable professional fees) resulting from buyers specification, application, or improper use of goods described hereon; buyers omission or neglect. HealthCraft Products Inc. does not assume any liability for damage resulting from services performed by others or faulty installation, misuse or misapplication of goods sold by HealthCraft Products Inc. HealthCraft Products Inc. shall not be liable for prospective profits or special, indirect, or consequential damages, or for the cost of any corrective work done without HealthCraft Products Inc. prior approval. HealthCraft Products Inc. total liability hereunder shall in no event exceed the purchase price of the goods specified hereon.

Specifications subject to change without notice.

HealthCraft Products Inc.  
2790 Fenton Road  
Ottawa, Canada  
K1T 3T7



## DELIVERY CONTENTS

## FIGURE A.

1. Rail (Shampoo Shelf)
2. #10 x 2" Wood Screw, S/S (x6)

## INSTALLATION WARNINGS

## FIGURE B.

1. Rail must be installed to walls that are structurally sound.
2. If desired installation location does not have adequate structure, add wood blocking.
3. To reinforce hollow walls, we recommend Easy-Mount Anchors (each sold separately). Weight capacity 300lbs/136kg.
4. CAUTION - Do not install if there is no structure for one side. Do not install if there is no structure behind drywall.
5. CAUTION - Do not install if structure behind walls is unknown.
6. CAUTION - Do not install into metal studs.
- 7a. CAUTION - Do not install in fiberglass / acrylic shower enclosures with insufficient stiffness and strength. 7b. Add wood blocking if required.

## SUGGESTED SHAMPOO SHELF LOCATIONS

## FIGURE C.

Align the notch on the flange with the center of vertical studs. To determine the optimal mounting location, we recommend holding the rail in place and walking through the motions of a transfer (sitting, standing, reaching, etc.). ADA recommended rail height of 33-36" / 838-914mm.

## INSTALLATION

## FIGURE D.

1. Hold the rail against the wall and adjust with level. Using the flanges as a locating guide, mark the screw hole locations.
2. Drill pilot holes for fasteners.
3. Fasten the rail to the wall using appropriate fasteners (minimum 2 per flange) and waterproofing.
4. Slide flange cover to conceal screws. Inspect hardware regularly, and tighten if required.

## TECHNICAL DATA

See Figure E.  
\*Complies with ADA 609 Grab Bars.

## PRODUCT USAGE

See Figure F.  
CAUTION - Rail and bathtub are slippery when wet.

## APERÇU

Nous vous remercions d'avoir opté pour la Tablette pour shampoing PLUS. Veuillez lire et vous familiariser avec les instructions du présent manuel; veuillez conserver ce manuel pour consultation ultérieure. Il vous incombe de veiller à ce que la Tablette pour shampoing PLUS est correctement assemblée, installée et entretenue. Le défaut d'observer les instructions contenues dans le présent manuel pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. Si vous ne disposez pas de l'équipement nécessaire pour effectuer le travail décrit, nous vous conseillons de recourir à un entrepreneur compétent pour l'installation.

La Tablette pour shampoing PLUS est la combinaison d'une barre d'appui et d'une tablette conçue afin d'offrir un accessoire de sécurité discret dans la salle de bain. La Tablette pour shampoing PLUS est destinée à être utilisée comme barre d'appui et sa fonction secondaire est de ranger des bouteilles et autres produits de douche/bain. La Tablette pour shampoing PLUS offre un support vertical et horizontal modéré permettant aux personnes handicapées de passer en position assise ou debout. La Tablette pour shampoing PLUS doit être installée à la paroi structurelle au moyen de dispositifs de fixation appropriés. Le plateau (sur lequel reposent les bouteilles) N'EST PAS destiné à être un accessoire de soutien. Le poids maximal de l'utilisateur pour ce produit est de 227 kg/500 lb. Remarque : Le produit n'est pas destiné à soutenir tout le poids corporel. La Tablette pour shampoing PLUS ne doit pas être utilisée autrement qu'il est décrit ci-dessus.

## GARANTIE LIMITÉE À VIE

Les produits sont protégés par une garantie à vie contre les défauts, pièces et main-d'oeuvre, pour l'acheteur initial. La garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été endommagés en raison d'un abus, d'un dommage accidentel, d'une modification, d'une usure normale, non plus qu'elle s'applique aux matériaux en bois ou aux taches, ou suite à l'utilisation de produits d'entretien abrasifs et corrosifs.

L'acheteur, par la présente, indemnise, accepte de garantir et de défendre HealthCraft Products inc. à l'égard de toutes responsabilités, réclamations (fondées et non fondées), pertes, dommages, coûts et dépenses (y compris, mais sans s'y limiter, des dommages consécutifs et des honoraires professionnels raisonnables) résultant de la spécification des acheteurs, une application ou une mauvaise utilisation des produits décrits ici; l'omission ou la négligence des acheteurs. HealthCraft Products inc. décline toute responsabilité pour les dommages résultant de services rendus par d'autres parties ou suite une installation défectueuse, une mauvaise utilisation ou une mauvaise application des marchandises vendues par HealthCraft Products inc. HealthCraft Products inc. ne sera pas responsable pour les bénéfices potentiels ou dommages spéciaux, indirects ou consécutifs, ou pour le coût des travaux correctifs réalisés sans l'approbation préalable de HealthCraft Products inc. La responsabilité totale de HealthCraft Products inc. en vertu des présentes ne doit en aucun cas excéder le prix d'achat des marchandises, tel que précisé aux présentes.

Les caractéristiques peuvent faire l'objet de à changement sans préavis.

HealthCraft Products Inc.  
2790 Fenton Road  
Ottawa, Canada  
K1T 3T7



## CONTENU À LA LIVRAISON –

FIGURE A.

1. Rampe (Tablette pour shampoing)
2. Vis à bois n ° 10 x 2", S/S (x6)

## AVERTISSEMENTS LORS DE L'INSTALLATION

FIGURE B.

1. La rampe doit être installée sur des murs dont la structure est solide.
2. Si l'emplacement désiré n'offre pas une structure adéquate, ajoutez des blocs de bois.
3. Pour renforcer les murs creux, nous recommandons les ancrages Easy-Mount (chacun vendu séparément). Capacité de poids 300lbs/136kg.
4. ATTENTION – Ne pas installer s'il n'y a pas de structure d'un côté. Ne pas installer s'il n'y a pas d'élément de structure derrière le gypse.
5. ATTENTION – Ne pas installer si la structure derrière le mur n'est pas connue.
6. ATTENTION – Ne pas installer dans des colombages métalliques.
- 7a. ATTENTION – Ne pas installer sur des cabinets de douche en fibre de verre ou en acrylique n'offrant pas suffisamment de rigidité et de robustesse.
- 7b. Ajoutez des blocs de bois si nécessaire.

## EMPLACEMENT SUGGÉRÉ POUR LA TABLETTE POUR SHAMPOOING

FIGURE C.

Alignez l'encoche de la bride avec le centre des montants verticaux. Afin de déterminer l'emplacement optimal pour l'installation, nous conseillons de maintenir la rampe en place en place et d'effectuer les mouvements de transfert (positions assise et debout, atteinte, etc.). Hauteur de rail recommandée par l'ADA de 838-914mm / 33-36 po.

## INSTALLATION

FIGURE D.

1. Maintenez le rail contre le mur et ajustez avec le niveau. En utilisant les brides comme guide de localisation, marquez les emplacements des trous de vis.
2. Percez des avant-trous pour les fixations.
3. Fixez le rail au mur à l'aide des attaches appropriées (minimum 2 par bride) et de l'étanchéité.
4. Faites glisser le couvercle de la bride sur la bride pour dissimuler les vis. Inspectez régulièrement la quincaillerie et serrez-la si nécessaire.

## DONNÉES TECHNIQUES

Voir la Figure E.

\*Conforme aux barres d'appui ADA 609.

## UTILISATION DU PRODUIT

Voir la Figure F.

ATTENTION – La rampe et la baignoire sont glissantes lorsque mouillées.

## GENERAL

Gracias por elegir el estante para champú PLUS. Lea y asegúrese de comprender las instrucciones de este manual, y guárdelo para referencia futura. Es su responsabilidad verificar que su estante para champú Invisia sea ensamblado, instalado y cuidado correctamente. Si no se siguen las instrucciones de este manual, podrían producirse como resultado lesiones graves o aun la muerte. Si usted no tiene los medios para realizar el trabajo que se describe, recomendamos que haga instalar el estante para champú PLUS por un contratista calificado.

El estante para champú PLUS es una combinación de barra para sujeción y estante, que ha sido concebida para disimular elementos de seguridad en un accesorio para el baño. El estante para champú PLUS está diseñado para usarse como barra de apoyo y su función secundaria es almacenar botellas y otros productos de ducha/baño. El estante para champú PLUS ha sido concebido para soportar una carga vertical y horizontal moderada, con el objetivo de ofrecer apoyo a las personas con discapacidad cuando se sientan o se ponen de pie. El estante para champú PLUS se instala con sujetadores apropiados que lo fijan a una pared estructural. La bandeja (para frascos) NO ha sido concebida como producto para sostén. El peso máximo del usuario de este producto es de 500 lb/227 kg. Nota: El producto no está destinado a soportar el peso total del cuerpo. El estante para champú PLUS no debe usarse de ninguna otra forma fuera de lo antes descrito.

## GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Los productos están cubiertos por una garantía limitada de por vida por defectos en los materiales y la mano de obra, en beneficio del comprador original. La garantía excluye productos que hayan sido dañados por uso incorrecto, daño accidental, alteración, desgaste normal, materiales de madera y teñido, o el uso de productos de limpieza corrosivos o abrasivos.

Por el presente, el comprador mantiene indemne y se manifiesta de acuerdo en liberar y defender a HealthCraft Products Inc. de toda responsabilidad, reclamo (fundado o infundado), pérdida, daño, costo y gasto (incluidos, sin que esto excluya otras posibilidades, los daños derivados y las costas profesionales razonables) que resulte de la especificación, la aplicación o el uso inapropiados de los productos que aquí se describen, como también de toda omisión o negligencia por parte del comprador. HealthCraft Products Inc. no asume ninguna responsabilidad por daños resultantes de los servicios prestados por otros, como tampoco de la instalación defectuosa, del uso incorrecto o de la aplicación incorrecta de los bienes vendidos por HealthCraft Products Inc. HealthCraft Products Inc. no será responsable por los beneficios potenciales o los daños especiales, indirectos o derivados, ni por el costo de ninguna tarea correctiva realizada sin la previa aprobación de HealthCraft Products Inc. La responsabilidad total de HealthCraft Products Inc. en virtud del presente no será superior en ningún caso al precio de compra de los productos aquí especificados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

HealthCraft Products Inc.  
2790 Fenton Road  
Ottawa, Canada  
K1T 3T7



## CONTENIDO ENTREGADO

FIGURA A.

1. Riel (Estante para champú)
2. Tornillo para madera #10 x 2", S/S (x6)

## ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

FIGURA B.

1. El riel se debe instalar sobre paredes de estructura sólida.
2. Si el lugar donde se desea hacer la instalación no tiene una estructura adecuada, agregue suplementos de madera.
3. Para reforzar las paredes huecas, recomendamos los anclajes Easy-Mount (cada uno se vende por separado). Capacidad de peso 300libras/136kg.
4. PRECAUCIÓN – No instalar si no hay una estructura para un lateral. No instalar si no hay una estructura detrás del panel de yeso.
5. PRECAUCIÓN – No instalar si se desconoce la estructura que está detrás de la pared.
6. PRECAUCIÓN – No instalar sobre montantes de metal.
- 7a. PRECAUCIÓN – No instalar en cerramientos para ducha de fibra de vidrio o acrílico sin la suficiente rigidez y resistencia. 7b. Agregue bloques de madera si es necesario.

## UBICACIONES SUGERIDAS PARA EL ESTANTE PARA CHAMPÚ

FIGURA C.

Alinee la muesca de la brida con el centro de los montantes verticales. A fin de determinar la ubicación óptima para montarlo, recomendamos sostener el barandal en el lugar y simular los movimientos de traslado (sentarse, ponerse de pie, estirarse, etc.). Altura de riel recomendada por ADA de 33-36" / 838-914 mm.

## INSTALACIÓN

FIGURA D.

1. Sostenga el riel contra la pared y ajuste con el nivel. Utilizando las bridas como guía de ubicación, marque las ubicaciones de los orificios de los tornillos.
2. Taladre orificios piloto para los sujetadores.
3. Fije el riel a la pared con los sujetadores adecuados (mínimo 2 por brida) e impermeabilización.
4. Deslice la cubierta de la brida sobre la brida para ocultar los tornillos. Inspeccione el hardware con regularidad y apriételo si es necesario.

## DATOS TÉCNICOS

Consulte la Figura E.

\*Cumple con la norma ADA 609 Barras de apoyo.

## UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO

Consulte la Figura F.

PRECAUCIÓN – El barandal y la tina son resbaladizos cuando están húmedos.